

Versuchsprotokoll

Supraleitung II

Tom Drechsler, Konstantin Schmid

Protokoll: 24. Januar 2020

Messung: 16. Januar 2020

Ort: REC/D008

Betreuer: Dr. Sergey Granovsky

Inhaltsverzeichnis

1	Versuchsziel und Überblick	3
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Supraleitung	3
2.1.1	Auftreten der Supraleitung	4
2.1.2	BCS-Theorie	5
2.1.3	Zerstörung der Supraleitung durch Magnetfelder	6
2.2	Magnetfeld einer Spule	7
2.3	Das Ge-Thermometer	7
2.4	Versuchsaufbau	9
3	Durchführung	10
3.1	Abkühlen des Badkryostaten	10
3.2	Computerfunktion	11
3.3	Messung des kritischen Feldes einer supraleitenden Bleiprobe für $2,0 \text{ K} < T < 4,2 \text{ K}$	11
3.4	Messung des kritischen Feldes einer supraleitenden Bleiprobe für $4,2 \text{ K} < T < 10 \text{ K}$	12
4	Auswertung	13
4.1	Vorversuch	13

4.2	Bestimmung der kritischen Magnetfelder	13
4.3	Vergleich der Thermometer	18
4.4	Bestimmung der Parameter $H_{C,0}$ und T_C und Vergleich mit der Literatur	18
4.5	Fit für das Ge-Thermometer	19
4.6	Werte der Gasuhr	22

1 Versuchsziel und Überblick

In diesem Versuch ist die Abhängigkeit des kritischen Magnetfeldes, bei dem der Übergang von Supraleitung zur Normalleitung erfolgt, zu untersuchen. Weiterhin soll der Versuch Kenntnisse und Fähigkeiten zum Aufbau von Tieftemperatur-Kryostaten und zur Handhabung kryogener Kältemittel (LHe, LN₂) vermitteln. Dazu sind folgende Versuchsteile zu bearbeiten:

- Einkühlen eines LHe-Badkryostaten
- Bestimmung des kritischen Magnetfeldes für eine Blei-Probe als Funktion der Temperatur im Temperaturbereich zwischen 1,5 K und 10 K
- Konstruktion der Phasenlinie zwischen supraleitendem und normalleitendem Zustand und Vergleich mit der BCS-Theorie und Literaturwerten

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Supraleitung

Bei supraleitenden Materialien tritt bei einer kritischen Temperatur T_C (gleichbedeutend mit Sprungtemperatur) ein Phasenübergang vom normalleitenden Zustand zum supraleitenden Zustand auf. Dieser ist dann dadurch gekennzeichnet, dass der Gleichstromwiderstand auf 0 abfällt oder er zumindest so nahe bei 0 liegt, dass in supraleitenden Ringen Dauerströme beobachtet werden können. ([5], Seite 371)

Dies ist in folgendem Bild für Quecksilber dargestellt:

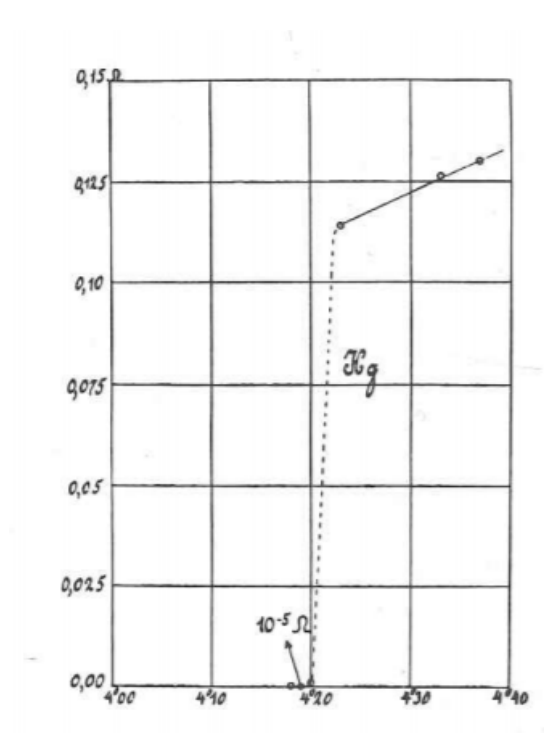


Abbildung 1: Verhalten des Widerstandes eines Supraleiters bei verschiedenen Temperaturen, entnommen aus [5] (Seite 370)

2.1.1 Auftreten der Supraleitung

Supraleitung kann bei verschiedenen Arten von Materialien auftreten: bei vielen metallischen Elementen, Legierungen, intermetallischen Verbindungen und Halbleitern. Dabei können verschiedene Sprungtemperaturen beobachtet werden. Auftretende Werte für T_C erstrecken sich von 0,001 K für Rhodium bis 250 K für LaH_{10} . Supraleiter, die so eine signifikant höhere Sprungtemperatur besitzen, werden als Hochtemperatursupraleiter bezeichnet.

In diesem Versuch wird Blei untersucht. Der Literaturwert für die kritische Temperatur für Blei liegt bei $T_C = 7,196$ K. Dies kann aus folgender Tabelle entnommen werden:

Element	Al	In	Nb	Pb	Sn	Ta	Tl
T_c [K]	1.19	3.408	9.25	7.196	3.722	4.47	2.38
B_{cth} [mT]	10.49	28.15	206	80.34	30.55	82.9	17.65
$\lambda_L(0)$ [nm]	50	65	32–45	40	50	35	
κ_∞	0.03	0.06	~ 0.8	0.4	0.1	0.35	0.3
Verbindung	NbTi	Nb ₃ Sn	NbN	PbIn (2–30%)	PbIn (2–50%)	Nb ₃ Ge	V ₃ Si
T_c [K]	$\simeq 10$	$\simeq 18$	$\simeq 16$	$\simeq 7$	$\simeq 8.3$	23	16
B_{c2} [T]	$\simeq 10.5$	$\simeq 23\text{--}29$	$\simeq 15$	$\simeq 0.1\text{--}0.4$	$\simeq 0.1\text{--}0.2$	38	20
$\lambda_L(0)$ [nm]	$\simeq 300$	$\simeq 80$	$\simeq 200$	$\simeq 150$	$\simeq 200$	90	60
κ_∞	$\simeq 75$	$\simeq 20\text{--}25$	$\simeq 40$	$\simeq 5\text{--}15$	$\simeq 8\text{--}16$	30	20

Abbildung 2: Kritische Temperaturen einiger Supraleiter, entnommen aus [6] (Seite 816)

2.1.2 BCS-Theorie

Die BCS-Theorie liefert die theoretische Erklärung zur Entstehung der konventionellen Supraleitung:

Ein Elektron verändert durch Energieabgabe die Gitterschwingung, sodass ein zweites Elektron durch Aufnahme eines Phonons einen dementsprechenden Energiegewinn erzielt. Diese beiden Elektronen können nun ein sogenanntes Cooper-Paar bilden. Dieses hat die Eigenschaft, dass es bosonischen Charakter hat, da Elektronen Fermionen mit Spin $s = \frac{1}{2}$ sind. Bei gleicher Richtung der Spins der Elektronen im Cooper-Paar erhält man also einen Gesamtspin $S = 1$ und bei entgegen gerichteten Spins $S = 0$. Bosonen können beliebig häufig den gleichen Zustand besetzen, so auch den Grundzustand. Dies ist energetisch günstiger und kann mit Hilfe einer Bose-Einstein-Wellenfunktion mathematisch beschrieben werden. Die Wellenfunktion überspannt den gesamten Festkörper und kann so von lokalen Hindernissen nicht mehr beeinflusst werden, sodass ein widerstandsloser Ladungstransport möglich ist.

Das Problem an dieser Theorie ist, dass durch den Ausgangspunkt der Veränderung der Gitterschwingung durch Elektronen die Temperatur sehr gering sein muss. Somit können mit der Theorie in der hier dargestellten Form keine Hochtemperatur-Supraleiter beschrieben werden, die deshalb auch als unkonventionelle Supraleiter bezeichnet wer-

den.

2.1.3 Zerstörung der Supraleitung durch Magnetfelder

Durch genügend große Magnetfelder kann der Effekt der Supraleitung zerstört werden. Das Magnetfeld, bei dem dieser Übergang erfolgt, wird als $H_C(T)$ (kritisches Magnetfeld) bezeichnet. Dieses ist temperaturabhängig und hat bei der kritischen Temperatur den Wert 0. Für $H_C(T)$ gilt folgender Zusammenhang:

$$H_C(T) = H_{C,0}(T) \left[1 - \left(\frac{T}{T_C} \right)^2 \right] \quad (1)$$

Die Strategie in diesem Versuch ist es also für verschiedene Temperaturen das kritische Magnetfeld zu messen und so das Phasendiagramm zu konstruieren. Der zu erwartende Verlauf im Phasendiagramm sieht dabei folgendermaßen aus:

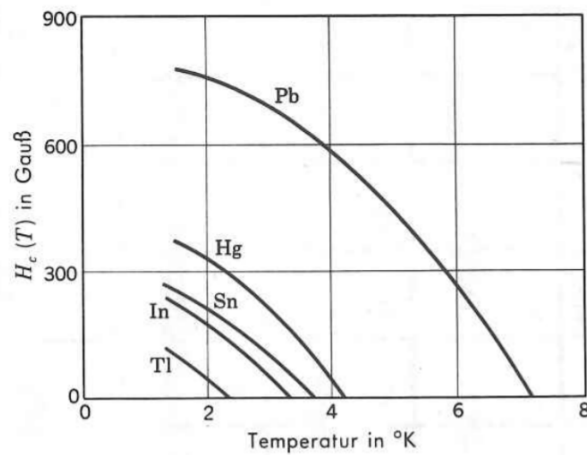


Abbildung 3: Phasendiagramm mit kritischen Magnetfeldern verschiedener Supraleiter, entnommen aus [5] (Seite 374)

Die durchgezogenen Linien sind die kritischen Magnetfelder, also die Schwellenwerte. Links unterhalb dieser ist der supraleitende Zustand, rechts oberhalb sind die Materialien normalleitend.

2.2 Magnetfeld einer Spule

Das Magnetfeld, welches in diesem Versuch verwendet wird, wird durch eine Spule erzeugt. Allgemein erhält man solche Magnetfelder durch das Biot-Savart-Gesetz:

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{l} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \quad (2)$$

Ausführen dieser Rechnung für eine Zylinderspule führt auf:

$$B(0) = \mu_0 \frac{N I}{\sqrt{(2R)^2 + l^2}} \quad (3)$$

N bezeichnet hierbei die Windungszahl der Spule, I die Stromstärke, R den Radius der Spule und l die Länge der Spule. Da bei der uns vorliegenden Kupfer-Spule $l \gg 2R$ gilt, kann folgender Näherungsausdruck für das erzeugte Magnetfeld verwendet werden:

$$B \approx \mu_0 \frac{N I}{l} \quad (4)$$

Um gegebenenfalls H und nicht B zu betrachten, muss Gleichung (4) noch durch μ_0 geteilt werden:

$$H = \frac{N I}{l} \quad (5)$$

Der Faktor $\frac{N}{l}$ ist dabei als $234 \frac{1}{\text{cm}}$ vorgegeben. So kann im Versuch das Magnetfeld durch Variieren der Stromstärke eingestellt werden.

2.3 Das Ge-Thermometer

Im Versuch wird ein Ge-Thermometer verwendet. Bei diesem wird über den Widerstand die Temperatur bestimmt. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass das Signal direkt als Spannung vorliegt und über das Ohm'sche Gesetz in einen Widerstand umgerechnet werden kann:

$$R = \frac{U}{I} \quad (6)$$

Es bietet sich in diesem Versuch die Verwendung von Germanium an, da dieses ein Halbleiter ist. Die qualitative Darstellung des Widerstandes eines Halbleiters in Abhängigkeit

von der Temperatur ist Folgende:

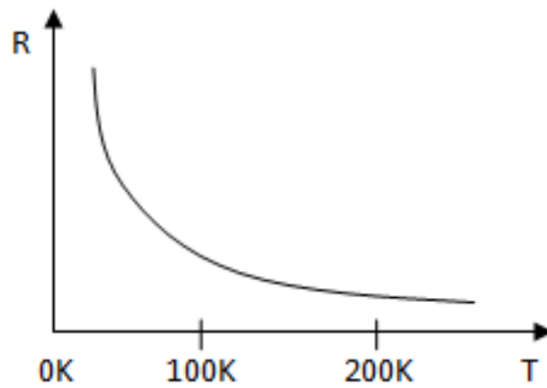


Abbildung 4: Widerstand eines Halbleiters, entnommen aus [4]

Es ist vor allem das Verhalten bei kleinen Temperaturen relevant. Für kleine Temperaturen unterscheiden sich die Widerstände aufgrund des exponentiellen Abfalls deutlich, so dass besonders diese Temperaturen gut zu messen sind, was für den Versuch eine wichtige Grundvoraussetzung ist. Für Metalle verläuft die Kurve im betrachteten Temperaturbereich annähernd linear, sodass der Einsatz eines metallischen Widerstandsthermometers hier nicht funktioniert.

2.4 Versuchsaufbau

Der verwendete Versuchsaufbau ist in nachfolgender Abbildung dargestellt:

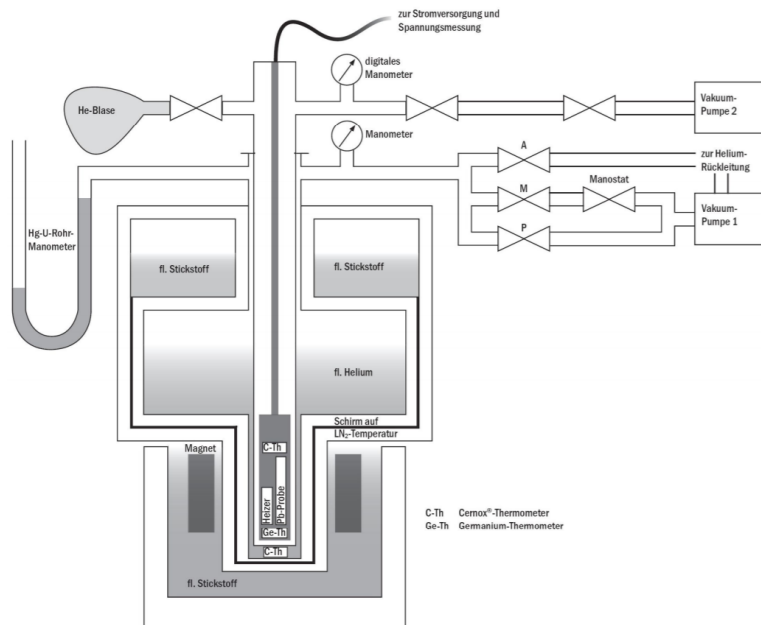


Abbildung 5: Verwendeter Versuchsaufbau, entnommen aus [3]

Der Magnet, also die Kupfer-Spule, wird mit Hilfe von flüssigem Stickstoff gekühlt. Die Bleiprobe wird durch flüssigen Stickstoff und flüssiges Helium gekühlt. Da durch diese Kühlung allerdings nur eine Temperatur von 4,2 K erreicht werden kann, gibt es das Manostat und die Vakuumpumpe 1. Durch diese kann der Druck verändert werden. Durch Abpumpen des Dampfes über der Flüssigkeit (LHe) wird die Temperatur gesenkt, sodass mit diesem Aufbau Temperaturen bis ca. 1,8 K erreicht werden können. Die Messung des Drucks erfolgt über Manometer. Um Temperaturen über 4,2 K zu erhalten, ist bei der Bleiprobe ein Heizer vorhanden, der dann die Temperatur auf 10 K erhöhen kann.

Der konkrete Aufbau des Kryostats findet sich in folgender Abbildung wieder:

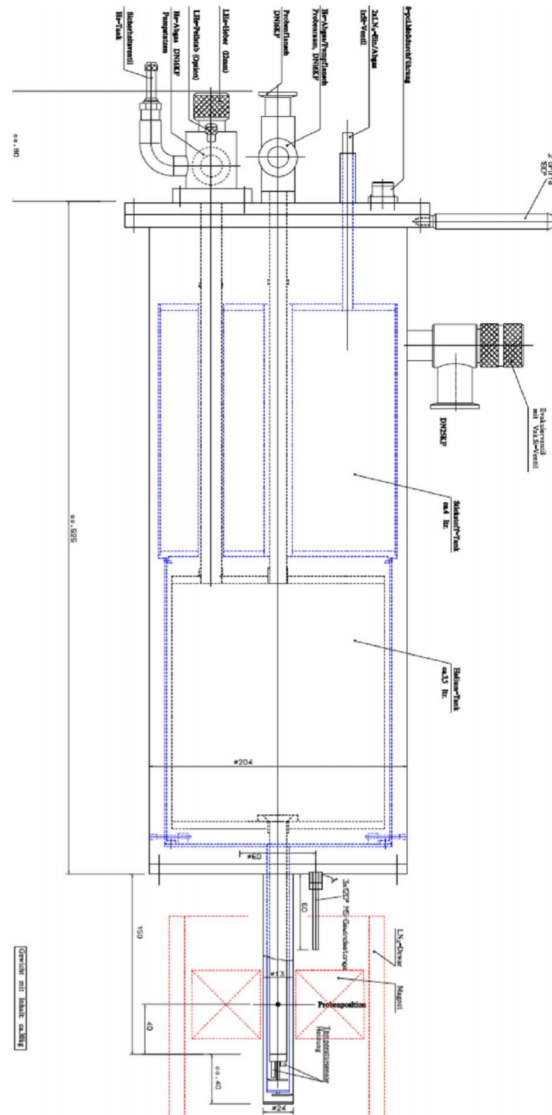


Abbildung 6: Aufbau des Kryostats, entnommen aus [3]

3 Durchführung

3.1 Abkühlen des Badkryostaten

- Einschalten der Messgeräte und Ausschalten des Heizers, um unkontrolliertes Heizen zu vermeiden
- nach Vakuumieren des Kryostats (vom Betreuer am Vortag erledigt): Einfüllen von flüssigem Stickstoff in Außenbehälter (LN₂-Drucktank an Gefäß über Teflon-

- schlauch angeschlossen), Einfüllen beendet als LN_2 am Abgasstutzen herausspritzt
- nach Erreichen einer Temperatur von unter 150 K: Einfüllen von flüssigem Helium möglich
 - Einführen des Hebersystems in das Heliumgefäß bzw. in das Kryostat und Verbinden beider Teile, leichtes Öffnen des Ventils am Hebersystem, Ablesen des Wertes der Gasuhr, Beobachten des Laufs der Gasuhr, bei schnellem Lauf der Gasuhr ist durch das Ventil zu drosseln, bei erneut schnellem Lauf der Gasuhr ist das Befüllen zu beenden
 - Abwarten der Abkühlung bis ca. 4,2 K
 - Kühlen der Spule mit flüssigem Stickstoff, um Durchbrennen der Windungen zu vermeiden: Füllen des Kunststoff-Dewargefäßes mit flüssigem Stickstoff, Schieben des Gefäßes über das Endstück des Kryostaten und Herausziehen des Versuchsstandes zwecks Abstellen des Gefäßes
 - Nachfüllen des Gefäßes mit flüssigem Stickstoff ca. alle 20 min., da Gefäß nicht ideal isoliert

3.2 Computerfunktion

- Einschalten des Computers und Starten des SU-Messprogramms
- Überprüfung der Messfunktion durch Taste Messen
- Aufnahme einer ersten Messreihe für 4,2 K bei Stromstärken von 0 A bis 3 A
- Speichern der Daten

3.3 Messung des kritischen Feldes einer supraleitenden Bleiprobe für $2,0 \text{ K} < T < 4,2 \text{ K}$

- Verringerung der Temperatur durch Abpumpen des Dampfs über der Flüssigkeit (LHe) mit Pumpe 1
- Aufnahme von ca. 10 Messreihen über:
- Einschalten der Vakuumpumpe (Pumpe 1), Regulierung des Dampfdrucks über Manostat M (Ventil A geschlossen, Ventil M geöffnet, Ventil P geschlossen)
- Aufnahme einer Messkurve für jeden Druckwert (Computerprogramm), Variieren des Spulenstroms von 0 A bis 3 A
- für letzten Wert längeres Abpumpen um tiefste Temperatur zu vermessen
- nach Beenden der Messreihen: Belüften des LHe-Bades auf Normaldruck (Pumpe aus, Ventil A langsam öffnen) und Belüften des Manostats (Ventil A offen, Ventil M öffnen, Manostat aufdrehen)

3.4 Messung des kritischen Feldes einer supraleitenden Bleiprobe für $4,2 \text{ K} < T < 10 \text{ K}$

- thermisches Abkoppeln der Probe vom LHe-Bad: Abpumpen des Austauschgases, Öffnen der Ventile an der Pumpe und am Kryostaten
- Erhöhung der Temperatur nun möglich ohne LHe vollständig zu verdampfen
- Temperaturregelung über LakeShore Temperature Controller: Einstellen des Temperatursollwertes über Setpoint, Einstellen der maximalen Leistung über Heater Range auf 625 mW
- Temperaturerhöhung in Schritten von 0,2 K
- Aufzeichnen der Messwerte nach Stabilisierung der Temperatur, wieder Stromstärken von 0 A bis 3 A
- Beenden der Messung, wenn bei einer Messreihen kein Sprung mehr auftritt (Probe auch ohne Magnetfeld normalleitend)
- Ablesen der Gasuhr nach Beenden der Messung

4 Auswertung

4.1 Vorversuch

In einem ersten Vorversuch sollte gezeigt werden, dass die aufgenommenen Messdaten für eine gleiche Temperatur unabhängig von der Richtung des Stromes durch die Probe sind. Dazu wurde für $T = 4,309 \text{ K}$ einmal für $I = 0,2 \text{ A}$ in positive und einmal für die gleich Stromstärke in negative Richtung vermessen:

4.2 Bestimmung der kritischen Magnetfelder

Um die Methode der Auswertung einmal exemplarisch zu erklären wurde die erste Messung (für eine Temperatur von $4,31 \text{ K}$) ausgewählt:

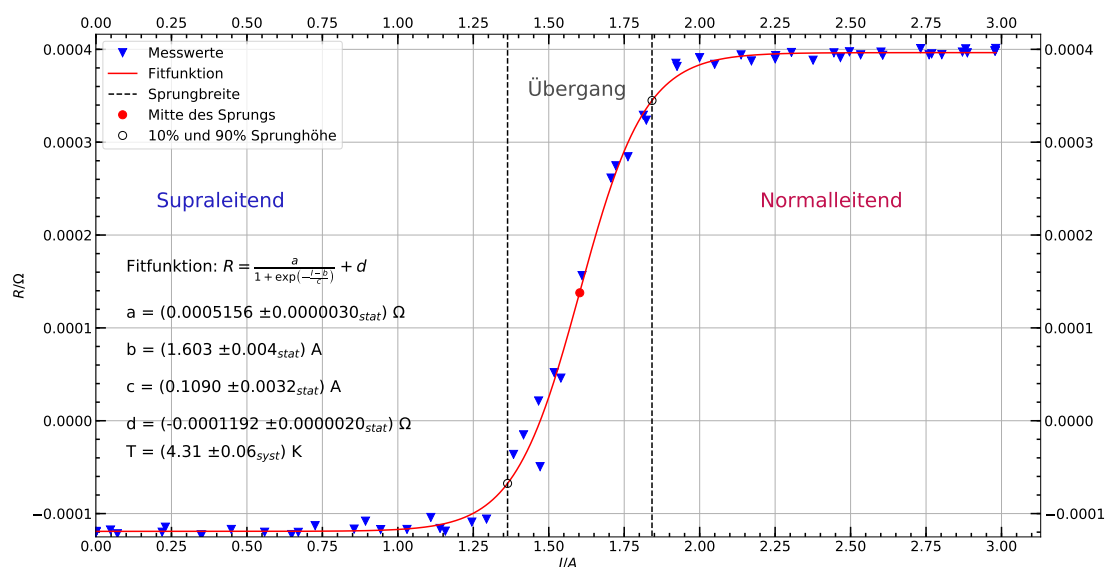


Abbildung 7: Messwerte für $T = 4,31 \text{ K}$

In der Messung wurde die Spannung in Abhängigkeit vom Spulenstrom I gemessen. Dabei wurde der Strom zur Widerstandsbestimmung so gewählt, dass 1Ω gerade 1 V entspricht. Im Plot ist deutlich der Sprung des Widerstandes zu erkennen. Dabei sind für diesen teilweise negative Werte eingetragen, was an der Kalibrierung des Messgerätes liegt. Um nun die Stromstärke des kritischen Magnetfeldes zu bestimmen, wurde ein Fit

mit der im Plot angegeben Fitfunktion durchgeführt und der Sprung erfolgt gerade bei dem Wert des Fitparameters b .

Dies wurde nun für die anderen Temperaturen, wie in der Durchführung beschrieben, durchgeführt. Die jeweiligen Messbedingungen, also die Temperatur und der Druck sind in folgender Tabelle dargestellt:

T/K	p/mbar
4.309	1043
4.327	1043
4.351	1043
4.046	787
3.883	673
3.607	461
3.305	318
3.160	255
3.038	208
2.845	145
2.586	80
2.393	50
2.330	44
2.058	9
4.419	1019
4.599	1018
4.798	1018
4.997	1019
5.194	1020
5.397	1019
5.598	1018
5.798	1018
5.998	1018
6.199	1018
6.399	1018
6.598	1018
6.797	1019

Tabelle 1: Druck der Messung für verschiedene Temperaturen

Für die Temperaturen unter 4,2 K ist also, wie bereits diskutiert, der Druck deutlich geringer, damit diese überhaupt erreicht werden können. Für die Temperaturen über 4,2 K ist der Druck praktisch konstant und zwar gleich dem Umgebungsdruck.

Die dann mit der oben beschriebenen Methode bestimmten kritischen Werte , also die kritische Stromstärke, das kritische Magnetfeld und deren Unsicherheiten sind hier zu finden:

T/K	$\Delta T_{\text{syst}}/\text{K}$	I_{S}/A	$\Delta I_{\text{S,syst}}/\text{A}$	$\Delta I_{\text{S,stat}}/\text{A}$	B_{S}/Gs	$\Delta B_{\text{S,syst}}/\text{Gs}$	$\Delta B_{\text{S,stat}}/\text{Gs}$
4.309	0.004	1.6028	0.2393	0.0040	471.301	70.361	1.167
4.327	0.010	1.5501	0.2424	0.0035	455.809	71.286	1.028
4.351	0.016	1.5579	0.2612	0.0039	458.104	76.801	1.152
4.046	0.005	1.7573	0.2590	0.0070	516.742	76.167	2.045
3.883	0.017	1.7995	0.2596	0.0022	529.135	76.348	0.659
3.607	0.006	1.9327	0.2786	0.0028	568.303	81.915	0.817
3.305	0.006	2.0767	0.2939	0.0035	610.653	86.412	1.034
3.160	0.006	2.1465	0.2855	0.0023	631.186	83.952	0.684
3.038	0.007	2.2034	0.3038	0.0025	647.908	89.323	0.729
2.845	0.006	2.2882	0.2923	0.0021	672.841	85.961	0.606
2.586	0.007	2.3996	0.2908	0.0022	705.607	85.497	0.637
2.393	0.015	2.4783	0.2693	0.0037	728.761	79.179	1.090
2.330	0.008	2.5009	0.2752	0.0023	735.386	80.927	0.666
2.058	0.008	2.5965	0.2502	0.0015	763.502	73.560	0.446
4.419	0.014	1.5489	0.2329	0.0020	455.467	68.497	0.576
4.599	0.005	1.4573	0.2266	0.0030	428.514	66.647	0.875
4.798	0.002	1.3636	0.2137	0.0052	400.977	62.851	1.541
4.997	0.002	1.2269	0.1955	0.0026	360.781	57.496	0.761
5.194	0.004	1.1152	0.1990	0.0018	327.930	58.522	0.521
5.397	0.002	0.9906	0.1897	0.0019	291.292	55.778	0.564
5.598	0.003	0.8701	0.1528	0.0013	255.844	44.920	0.387
5.798	0.002	0.7403	0.1466	0.0011	217.674	43.113	0.329
5.998	0.002	0.6064	0.1286	0.0008	178.308	37.813	0.246
6.199	0.002	0.4549	0.1135	0.0029	133.778	33.379	0.857
6.399	0.002	0.3240	0.0909	0.0010	95.261	26.734	0.284
6.598	0.001	0.1733	0.0918	0.0020	50.960	26.994	0.578
6.797	0.002	0.0326	0.0721	0.0057	9.571	21.188	1.676

Tabelle 2: Kritische Werte der magnetischen Flussdichte B in Abhängigkeit von der Temperatur (T) für Blei

Es war bereits während der Durchführung des Versuchs deutlich zu beobachten, dass die kritische Stromstärke für eine zunehmende Temperatur immer kleiner wurde. Dies ist nochmals in folgender Grafik illustriert:

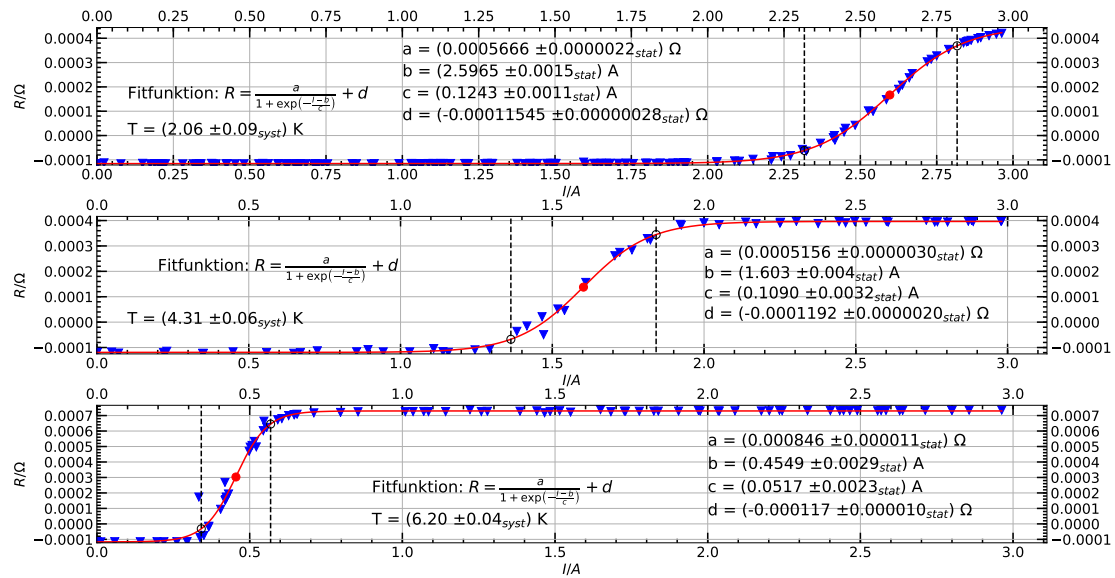


Abbildung 8: Darstellung der Messwerte für 3 verschiedene Temperaturen

Der Sprung erfolgte also immer früher, bis er bei einer Temperatur von 6,797 K praktisch gar nicht mehr erfolgte, sodass die Aufnahme der Messwerte bei dieser Temperatur beendet werden konnte, da die Probe bei dieser Temperatur die ganze Zeit normalleitend war:

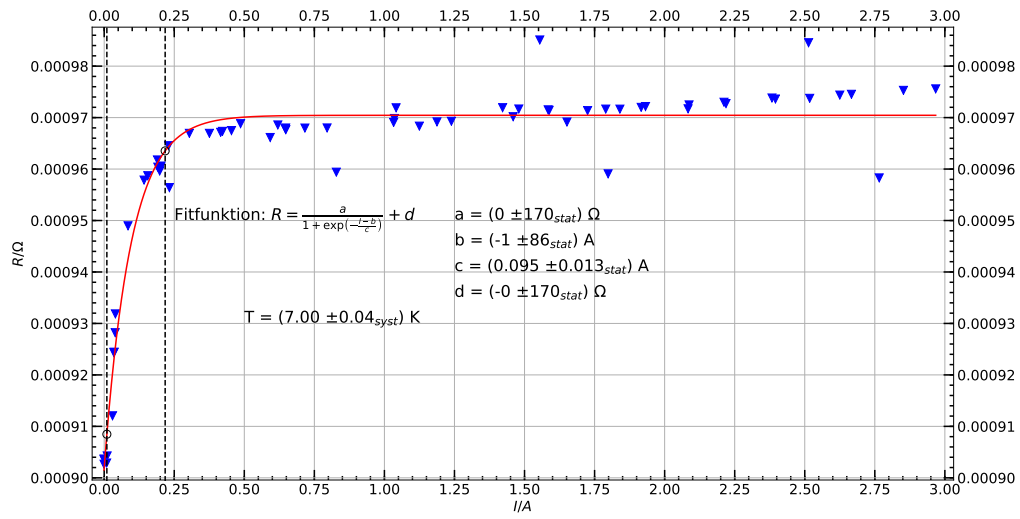


Abbildung 9: Letzte Messung, bei $T = 6,797 K$

4.3 Vergleich der Thermometer

4.4 Bestimmung der Parameter $H_{C,0}$ und T_C und Vergleich mit der Literatur

Die Werte aus Tabelle (2) können nun in einem Phasendiagramm dargestellt werden und nach Gleichung (1) gefittet werden:

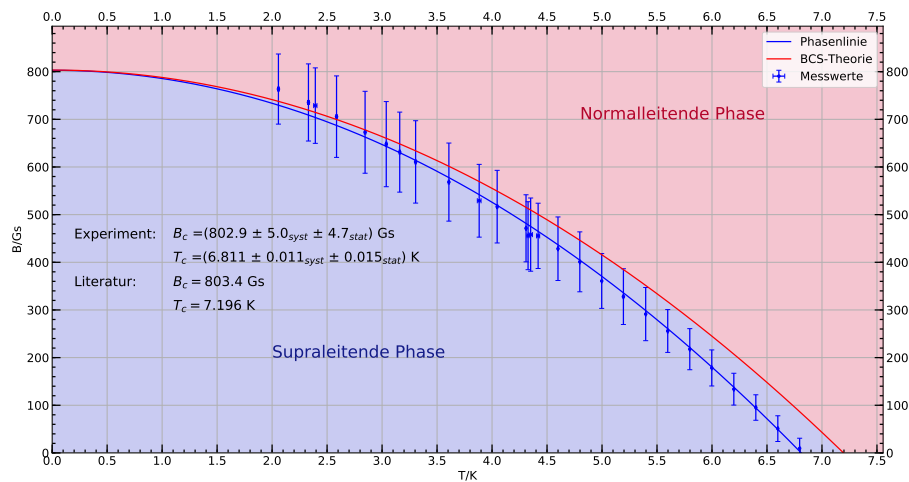


Abbildung 10: Phasendiagramm der Bleiprobe, kritisches Magnetfeld in Abhängigkeit von der Temperatur

Die hier verwendeten Theoriewerte (rote Linie) stammen aus [6]. Der prinzipielle Verlauf beider Kurven ist gleich, besonders im Temperaturbereich von 2,0 K bis 5,0 K stimmen die Messwerte im Rahmen der Messungenauigkeit mit den Literaturwerten überein. Selbiges gilt auch für den durch Fit bestimmten Schnittpunkt mit der y-Achse. Die kritische Temperatur stimmt im Rahmen der Messunsicherheiten nicht mit dem Literaturwert von 7,196 K überein. Der Grund dafür muss in einer systematischen Unsicherheit liegen, da die gemessene Kurve unter der Theoriekurve liegt, die Abweichung hat also keinen zufälligen Charakter.

Die Abweichung lässt sich dadurch begründen, dass nicht nur die Probe allein, sondern der gesamte Probenraum geheizt werden muss. Dadurch kommt es konstruktionsbedingt stets zu unerwünschten thermischen Verlusten. Andererseits besitzt die Probe eine endliche Ausdehnung und kann nicht instantan homogen temperiert werden. Bei tiefen Temperaturen geht die Wärmekapazität gegen 0, sodass sich Temperaturunterschiede leichter ausbreiten können, als im Hochtemperaturbereich.

4.5 Fit für das Ge-Thermometer

In diesem Teil der Auswertung soll die Kalibrierung des Germanium-Thermometers untersucht werden. Für eine alte Kalibrierkurve sind folgende Werte vorgegeben gewesen:

Alte Kalibrierungskurve des Ge-Thermometers

T (K)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
R (Ohm)	8836.21	6489.62	4983.43	3953.46	3205.12
T (K)	3.0	3.2	3.4	3.59	3.81
R (Ohm)	2769.28	2335.09	1976.83	1731.62	1524.65
T (K)	4.0	4.2	4.5	5.0	5.5
R (Ohm)	1348.98	1186.75	1006.24	770.88	606.35

Abbildung 11: Wertetabelle der alten Kalibrierungskurve des Ge-Thermometers, entnommen aus [3]

Ein Fit der Werte ergab folgendes Diagramm:

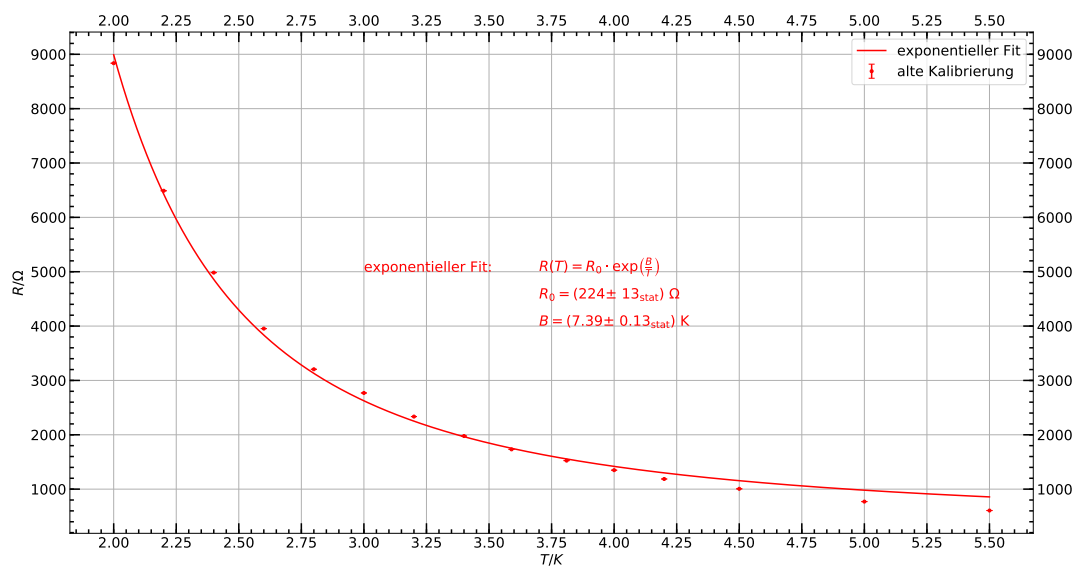


Abbildung 12: Fit der alten Kalibrierungskurve des Ge-Thermometers

Die Fitfunktion ist in der Grafik angegeben. Es wurde ein exponentieller Fit verwendet, da es sich um einen Halbleiter handelt. Ein Halbleiter ist durch einen negativen Temperaturkoeffizienten gekennzeichnet. Er leitet den Strom bei höheren Temperaturen deshalb besser und bei tieferen Temperaturen wird der Widerstand größer.

Zudem waren die Werte der Dampfdruckkurve für Helium gegeben:

Dampfdrucktabelle von ^4He (in mm Hg bzw. Torr)

T (K)	p (mm Hg)	T (K)	p (mm Hg)	T (K)	p (mm Hg)	T (K)	p (mm Hg)
1.5	3.0688	2.25	45.655	3.0	175.51	3.75	475.51
1.55	4.5660	2.3	51.151	3.05	196.57	3.8	502.05
1.6	5.7054	2.35	57.085	3.1	211.28	3.85	529.57
1.65	7.0476	2.4	63.476	3.15	226.73	3.9	558.09
1.7	8.6136	2.45	70.343	3.2	242.92	3.95	587.63
1.75	10.424	2.5	77.704	3.25	259.89	4.0	618.21
1.8	12.500	2.55	85.579	3.3	277.63	4.05	649.86
1.85	14.861	2.6	93.988	3.35	296.18	4.1	682.59
1.9	17.526	2.65	102.95	3.4	315.55	4.15	716.42
1.95	20.511	2.7	112.48	3.45	335.76	4.2	751.37
2.0	23.832	2.75	122.59	3.5	356.81	4.25	787.43
2.05	27.498	2.8	133.31	3.55	378.74	4.3	824.65
2.1	31.514	2.85	144.65	3.6	401.56		
2.15	35.878	2.9	156.63	3.65	425.28		
2.2	40.576	2.95	169.26	3.7	449.92		

Abbildung 13: Werte der Dampfdruckkurve für Helium

Diese erfüllen die Clausius-Clapeyron-Gleichung:

$$p(T) = R_0 \cdot e^{\frac{\Delta H_{m,V}}{R \cdot T}} \quad (7)$$

Hierbei wird $\Delta H_{m,V}$ im betrachteten Temperaturintervall als Konstant angenommen. Ein Fit mit p_0 und $\Delta H_{m,V}$ als freie Parameter ergibt:

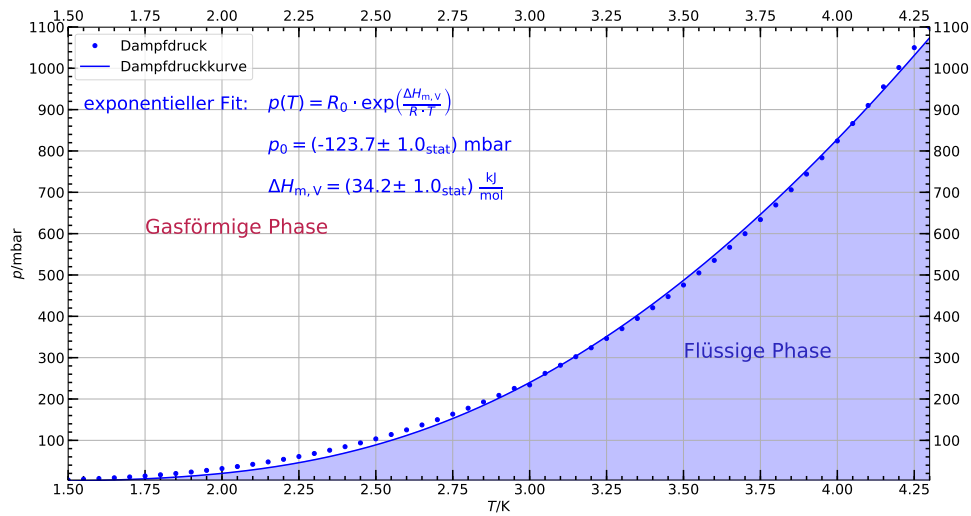


Abbildung 14: Dampfdruckkurve für Helium

Nun soll laut Aufgabenstellung aus dieser Dampfdruckkurve und den Druckwerten aus Tabelle (1) die Temperatur bestimmt werden. Die so bestimmten Temperaturen werden im Folgenden mit T_{Dampf} bezeichnet. Aus dem exponentiellen Fit für das Germanium kann außerdem zu dem jeweilig gemessenen Widerstand auch eine Temperatur bestimmt werden. Diese wird T_{fit} genannt. Nun kann die Differenz $T_{\text{fit}} - T_{\text{Dampf}}$ graphisch über T_{Dampf} dargestellt werden:

4.6 Werte der Gasuhr

Wie in der Versuchsanleitung gefordert, wurde der Stand der Gasuhr bei Beginn und bei Beenden des Versuchs abgelesen. Der Startwert waren: $88,092 \text{ m}^3$ und der Endwert: $94,263 \text{ m}^3$. Das während des Versuchs verbrauchte Volumen an gasförmigem Helium war also:

$$V(\text{GHe}) = 6,171 \text{ m}^3$$

Dies kann mittels folgender Umrechnung in ein Volumen für flüssiges Helium umgerechnet werden:

$$7001 \text{ GHe} \approx 11 \text{ LHe}$$

Die Umrechnung ergibt:

$$\begin{aligned} V(\text{LHe}) &= 6,171 \cdot 10^3 \text{ l GHe} \cdot \frac{1 \text{ l LHe}}{700 \text{ l GHe}} \\ \Rightarrow V(\text{LHe}) &= 8,8161 \end{aligned}$$

Es wurden also während des Versuchs 8,8161 flüssiges Helium verbraucht.

Literatur

- [1] *Hochtemperatursupraleiter*, https://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperatursupraleiter#cite_note-1, 18. Januar 2020.
- [2] *BCS-Theorie*, <https://de.wikipedia.org/wiki/BCS-Theorie>, 18. Januar 2020.
- [3] Versuchsanleitung Supraleitung 2 (SU2). TU Dresden.
- [4] *Widerstandsthermometer*, <https://me-lrt.de/widerstandsthermometer>, 18. Januar 2020.
- [5] *Festkörperphysik*, Kittel, Charles: Einführung in die Festkörperphysik. 8. Auflage. R. Oldenbourg Verlag GmbH. München. 1989.
- [6] *Festkörperphysik*, Gross, Rudolf: Festkörperphysik. R. Oldenbourg Verlag GmbH. München. 2012.